

DORA-6000

功能简介

体外循环

开机自检

开机后进行整机安全自检,保障每次治疗时设备运行安全。

AP、VP、TMP、DP监测

可靠的动态压力监测,保障透析安全。

血流量监测

血泵全面监测,支持大小泵管,可灵活调整血流量,操作更便捷。

肝素流量监测

肝素泵全面监测,可靠的堵塞监测,流量精准控制。

注射器自动识别

可自动识别不同规格的注射器,可监测注射器安装不当。

气泡监测

精细监测,可识别连续微小气泡,预防气泡进入人体,保障安全透析。

回血辅助功能

回血时血泵自动运行,持续监测静脉压,避免手动操作的繁琐和气泡混入类事故的发生,操作安全省时。

排液功能

自动排除血路中残留液体,让治疗结束耗材的整理更轻松、整洁。

备用电源

意外停电时,自动切换为电池供电模式,机器内部的蓄电池可维持血路系统的运转,确保患者的安全。

透析液回路

透析液流量监测

容量控制模式,流量持续监测可调,始终保持新鲜液与废液隔离。

透析液温度监测

透析液温度精准控制,多路监测,灵活可调。

稀释比率记忆功能

可设定和记忆多种A、B液稀释比率,可便捷切换多种配方。

超滤监测

密闭性+平衡性+精确度监测,超滤参数可分段设置,分段显示,视觉清晰明了。

漏血监测

高灵敏度光电监测漏血,实时监测体外失血情况发生。

强大的报警提示功能

报警提示信息明确详细,包括可能原因、处理步骤、水路动态。

消毒方式

化学消毒

流程全自动,支持多种消毒剂。

热化学消毒

流程全自动,高效热水柠檬酸消毒,包含热水洗。

安全性
Safety

精确性
Accuracy

超纯净
Ultrapure

德朗

确保安全有效的治疗

稳定性
Stability

人性化
Ease of use

广州瑞博医疗设备有限公司
广州市黄埔区瑞祥路296号A栋601房、602房

电话: (020)32290430 传真: (020)32051911

血液透析机

德朗


DORA-6000

安全性 / 稳定性 / 精确性
超纯净 / 人性化

CE 1639

广州瑞博医疗设备有限公司



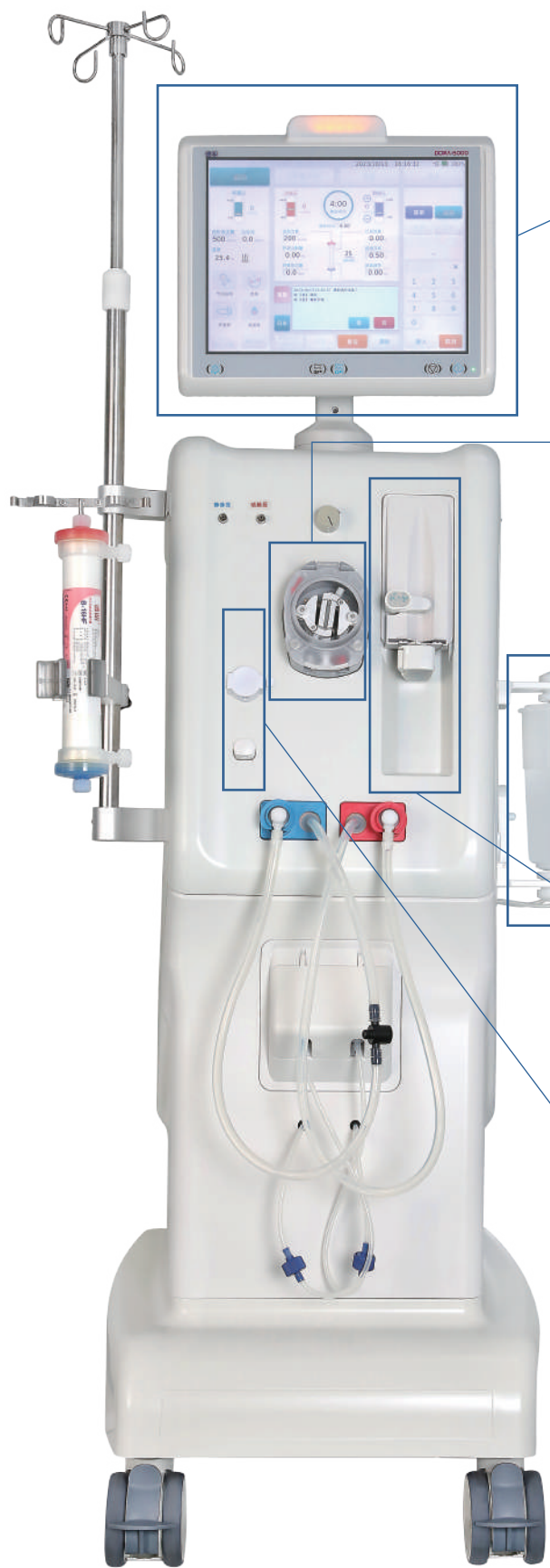

安全性

防护系统 安全自检 电磁防护

- DLF+MON+UI, 三大独立系统, 软、硬件双重连锁保护, 最高安全级别, 降低治疗风险。
- 开机自检 + 关键部件每半小时自检, 安全治疗有保障。
- 国际、欧盟最新标准设计高级别电磁防护 (EMC等级4)。

稳定性

设计开发 部件优选

- 以严谨之态度不断优化设计、调试, 以最简洁之设计满足临床治疗所需。
- 优选进口齿轮泵、柱塞泵、电磁阀等关键部件。

精确性

参数监测 Kt/V监控 超滤控制

- 各数据多重监测, 相互验证, 确保参数精确; 实时监测动静脉压、跨膜压; 透析液浓度多重检测;
- 保证透析充分性(在线清除率监控)
- 陶瓷泵脱水, 密闭性自检, 超滤精确。

超纯净

细菌过滤器 B干粉功能 消毒系统

- 在线制备超纯透析液, 保障纯净治疗。
- 避免AB液混合过程中感染的风险
- 4种消毒程序, 应对不同消毒清洗需求; 监视消毒液原液浓度, 防止吸空, 消毒液吸入管路排空, 防止残留。

人性化

配方预设 排液功能 技术维护

- 可预设多种透析液配方, 操作简单, 便于开展个性化治疗。
- 治疗结束后, 排除透析器内残留液体, 轻松处理耗材。
- 可全敞开式结构, 内部空间开阔, 维护便捷; 水路结构优化, 拆装便捷; 记录部件使用时间, 方便保养更换。

多角度触摸屏

15吋大屏, 图标清晰, 信息丰富, 部件参数, 动态提示, 多维观察。

操作更便捷

数字式+旋钮式, 双重血泵速度调节, 血流调节灵活快捷。

B干粉筒

安全有效地生成并使用B液

安全实用

既有注射器大小自动识别功能, 又有注射过程多重安全监测。

兼容性

面板平整, 装管简易。
配套管路不限制, 选择更自由。